


GEBRAUCHS- UND MONTAGE-ANLEITUNG

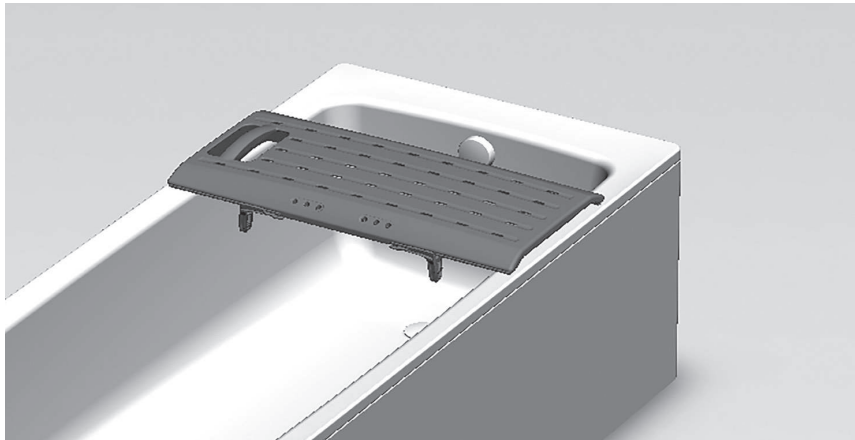

Art. 191000w Badebrett variboard 68 cm weiß

Art. 191000g Badebrett variboard 68 cm grau

Art. 192000w Badebrett variboard 73 cm weiß

Art. 192000g Badebrett variboard 73 cm grau

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch. Sie erhalten wichtige Sicherheitshinweise und wertvolle Tipps zur richtigen Benutzung und Pflege. Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich an Ihren delficare-Fachhändler, der Ihnen das Produkt geliefert hat.

Diese Bedienungsanleitung enthält alle notwendigen Hinweise für die Anpassung und Bedienung.



Die aktuellste Bedienungsanleitung kann auch als PDF beim Kundenservice angefordert, oder auf unserer Homepage www.delficare.de, heruntergeladen werden. Hierbei können vergrößerte Formate für sehbehinderte Personen dargestellt werden. Eine barrierefreie Gebrauchsanleitung in leichter und/oder einfacher Sprache ist seitens des Herstellers nicht lieferbar.

Konformitätserklärung:

Die delficare GmbH erklärt alleinverantwortlich für das beschriebene Produkt die Konformität gemäß der Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745

Zweckbestimmung:

Das Badewannenbrett wird auf den Wannenrand aufgelegt und über insgesamt 4, mit rutschsicheren TPE-Auflagen versehenen, Schiebern auf dem Badewannenrand fixiert. Auch auf der Unterseite des Badebrettes sind rutschhemmende TPE-Pads angebracht. Ein Haltegriff ist im Badebrett so integriert, dass er nicht übersteht und ggf. störend wirkt. Das Badebrett kommt u.a. dann in Betracht, wenn erhebliche Funktionseinschränkungen der oberen und/oder unteren Extremität vorliegen. Mit Einsatz des Hilfsmittels kann das Baden jedoch wieder weitgehend selbständig verrichtet werden. Die Anwendung setzt allerdings voraus, dass eine Restfunktionsfähigkeit bezüglich der Rumpfhaltung und des Gebrauchs der Extremitäten für die Bewältigung von Positionswechseln noch ausreichend vorhanden ist.

Indikation:

Unmöglichkeit des sicheren Sitzes oder des Hinsetzens in der Badewanne aufgrund Schädigung der Funktion der unteren Extremität mit eingeschränkter oder aufgehobener Beweglichkeit und Muskelkraft bei gleichzeitig erhaltener stabiler Rumpfhaltung und ausreichender Restfunktionen der oberen Extremitäten.


Ziel der Versorgung:

Ermöglichung des selbständigeren Badens/Duschens in der Badewanne zur Sicherung der Körperhygiene.

Kontraindikation:


Die Anwendung ist nicht geeignet für Personen bei denen keine oder unzureichende Restfunktionsfähigkeit bezüglich der Rumpfhaltung und des Gebrauchs der Extremitäten für die Bewältigung von Positionswechseln ausreichend vorhanden ist

Montage:

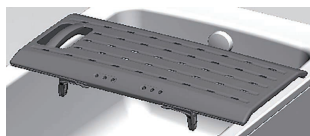

1. Lieferumfang

- 1 x Badebrett
- 1 x Bedienungsanleitung

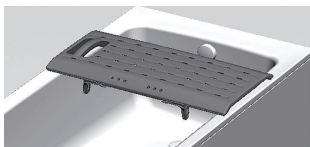


2. Badebrett auf die Wanne auflegen

Fertig montiertes Badebrett aus der Verpackung nehmen und quer zur Badewanne auf den Badewannenrand auflegen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass das Badewannenbrett so positioniert ist, dass die Auflageflächen gleichmäßig auf beide Seiten der Badewanne verteilt ist.

Bitte achten Sie darauf, dass die Auflagefläche auf beiden Seiten mind. 3 cm beträgt!


3. Badebrett fixieren

Anschließend die vier Schieber an die Badewanneninnenseite schieben um das Badewannenbrett an der Badewanne zu fixieren.. Dabei muss darauf geachtet werden, dass alle vier Schieber fest an der Badewanneninnenseite anliegen.

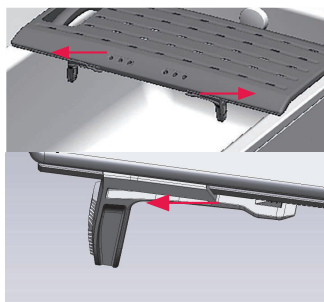

4. Fixierung lösen

Drücken Sie auf die Rastnase, damit diese entriegelt, und gleichzeitig schieben Sie die Verriegelung wieder in den Ursprungszustand nach innen.

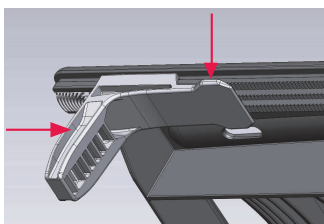

Benutzung:

Sicherheitshinweise

- Für die Montage und Demontage wird keine Haftung von uns übernommen.
- Für die Sicherheit des Benutzers darf dieser Artikel nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben (nicht missbräuchlich) verwendet werden.
- Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt auftritt, muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, gemeldet werden. In Deutschland ist es das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Berlin, www.bfarm.de

Warnhinweise

- Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam.
- Vor dem Gebrauch sind alle Bauteile auf Schäden und festen Sitz zu prüfen. Produkt bei Defekt nicht verwenden!
- Beim Hinsetzen langsam und gleichmäßig vorgehen. Nicht fallen lassen !
- Vorsicht - Abrutsch-/Absturzgefahr !
- Nicht auf das Badebrett stehen.
- Beachten Sie das zugelassene Maximalgewicht des Benutzers.
Diese Angabe finden Sie in den technischen Daten in dieser Bedienungsanleitung sowie auf dem Typenschild.
Das Produkt darf nicht dauerhaft Temperaturen über 60° C ausgesetzt werden (z.B. Verwendung in Sauna etc.)

Reinigen/Desinfektion

Von Hand mit einem feuchten Tuch regelmäßig reinigen!

- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden!
- Keine Scheuermittel verwenden!
- Keine hochdosierten Chlor- und Essigreiniger verwenden!
- Zur Desinfektion kann ein Sprühdesinfektionsmittel verwendet werden, z.B. Descosept AF oder Bacillol AF

Wartung / Wiedereinsatz

Das Badebrett varioboard ist wartungsfrei. Wenn eine Instandsetzung notwendig werden sollte, das Badebrett bitte an Ihren Fachhandel übergeben.

Wiedereinsatz: Dieses Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Beachten Sie, dass auch sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer übergeben werden. Das Produkt muss durch den Fachhandel überprüft, gereinigt und für den Wiedereinsatz in einen einwandfreien Zustand versetzt werden.

Lebensdauer

Nach ISO 17966 § 16.3 ist im Homecare-Bereich von einer 2-maligen Benutzung täglich auszugehen. Auf dieser Grundlage wurde das Badebrett auf eine Lebensdauer von 5 Jahren getestet.


Technische Daten:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge x Breite	Sitzbreite	Höhe	Gewicht	Wanneninnenmaße
191000w	variboard 68 cm weiß	68x34,5 cm	55 cm	4 cm	2,1 kg	38 - 61 cm
191000g	variboard 68 cm grau	68x34,5 cm	55 cm	4 cm	2,1 kg	38 - 61 cm
192000w	variboard 73 cm weiß	73x34,5 cm	60 cm	4 cm	2,3 kg	43 - 66 cm
192000g	variboard 73 cm grau	73x34,5 cm	60 cm	4 cm	2,3 kg	43 - 66 cm

Material: Kunststoff: PP (Polypropylen) POM (Polyoxymethylen) TPE (Thermoplastisches Elastomer)



Max. Belastbarkeit 150 kg

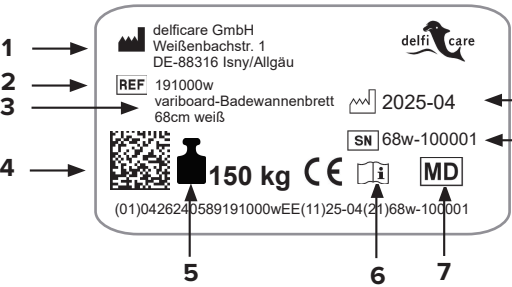

- 1 Hersteller | 2 Artikelnummer | 3 Artikelbezeichnung |
4 UDI-Code | 5 Max. Belastung | 6 Gebrauchsanweisung beachten |
7 Medizinprodukt | 8 Seriennummer | 9 Produktionsdatum (Jahr-Monat).

ENTSORGUNG

Die Geräteverpackung wird der Wertstoffwiederverwertung zugeführt.
Kunststoffteile werden der Werkstoffwiederverwertung zugeführt.
Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.
Erfragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

GARANTIE

Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre. Sie erstreckt sich auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Hiervon ausgeschlossen sind Schäden, die sich als Folge übermäßiger Beanspruchung, unrichtiger Handhabung, gewaltsamer, unrichtiger Handhabung, gewaltsamer Beschädigung oder unzulässiger Änderung / Instandsetzung ergeben. Änderungen bedingt durch technische Verbesserungen und Design-Modifikation bleiben vorbehalten.



delficare GmbH
Rehabilitationstechnik
Weißbachstraße 1
D-88316 Isny/Allgäu
Registrierungsnummer EUDAMED:
SRN DE-MF-000006410

Tel. +49 (0) 75 62 / 91 25 11
Fax. +49 (0) 75 62 / 91 25 24
e-mail: info@delficare.de
Web: www.delficare.de